



ABSORBERENDE MYK SILIKONBANDASJE


- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning^{1,2}
- Absorberer effektivt
- Kan brukes under kompresjon
- Minimerer risikoen for maserasjon³

Safetac® lag (myk silikon)

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning^{1,2}
- Hefter ikke til en fuktig såroverflate men skånsomt til tørr omkringliggende hud
- Minimerer risikoen for maserasjon³

Film bakside

- Pustende
- Vanntett

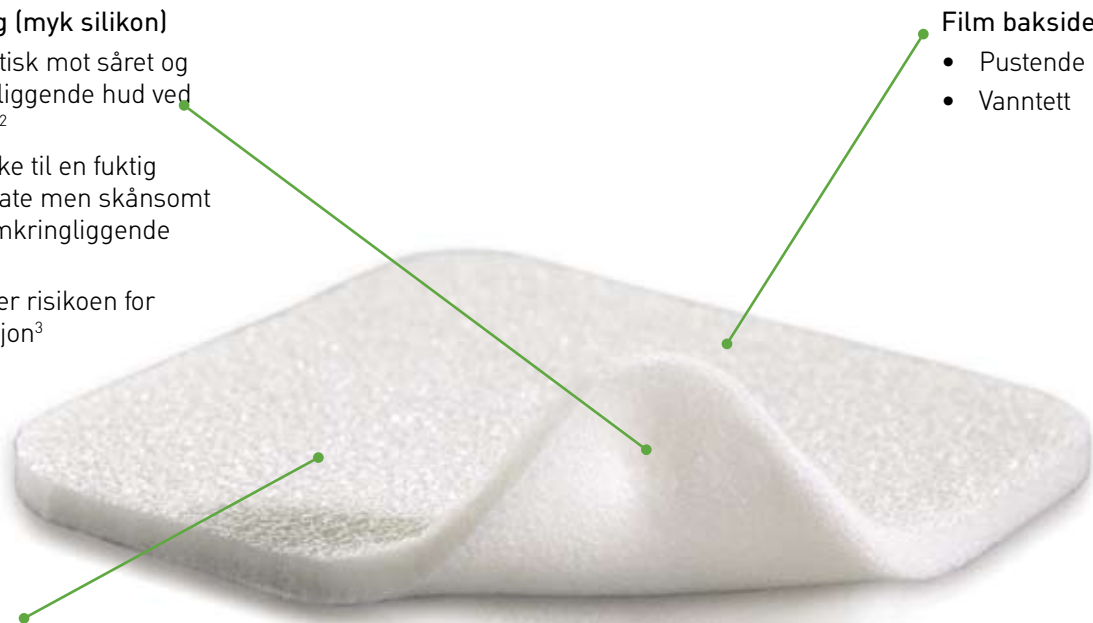

Skumpute

- Absorberer sårsekret
- Fungerer under kompresjon
- Holder formen
- Former seg etter kroppen

Safetac
TECHNOLOGY


Safetac® teknologi

*Mepilex behøver ikke klippes til sårstørrelsen ved bruk av kompresjon.


Safetac® teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.™

Safetac er en patentert hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex®-familien, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

For mer informasjon se www.safetac.com

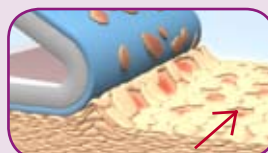


Hudstripping ved bruk av tradisjonelle heftemidler

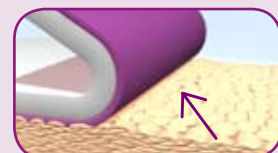

Ingen hudstripping ved bruk av Safetac

Hvordan bruke Mepilex®

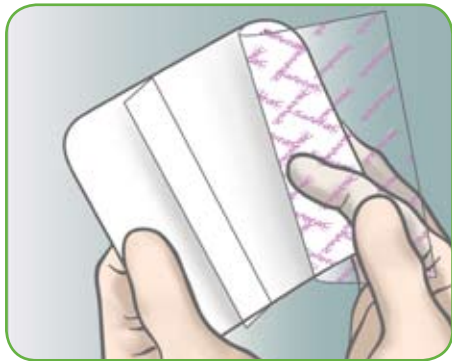

Rens sårområdet.
Fjern releasefilmen.



Mepilex bør overlape omkringliggende hud med minst 2 cm. Appliser den heftende siden mot såret. Ikke strekk.



Fiksør Mepilex med annen fiksering.

H057020607

Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en patentert teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.

Fordeler med Mepilex

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning
- Kan ligge på såret i opptil flere dager avhengig av sårets tilstand
- Minimerer risikoen for maserasjon
- Komfortabel i bruk
- Kan brukes under kompresjon
- Kan justeres og reappliseres uten at den mister hefteegenskapen
- Kan klippes til riktig størrelse

Bruksområder

Mepilex egner seg til en rekke væskende sår som for eksempel legg- og fotsår, trykksår, traumatiske sår som hudavskrapninger og sekundært tilhelende sår.

NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.



MEPILEX Sortiment

| Art.nr. | Str. i cm | Antall i eske | Antall i kartong |
|---------|-----------|---------------|------------------|
| 294100 | 10 x 10 | 5 | 70 |
| 294200 | 10 x 20 | 5 | 30 |
| 294300 | 15 x 15 | 5 | 30 |
| 294400 | 20 x 20 | 5 | 30 |

Mepilex Heel Sortiment

| | | | |
|--------|---------|---|----|
| 288100 | 13 x 20 | 5 | 25 |
| 288300 | 15 x 22 | 5 | 30 |

Produktene er pakket i sterile enhetspakninger