


Bellovac®
Exudrain®
Abdovac®
Sårdren

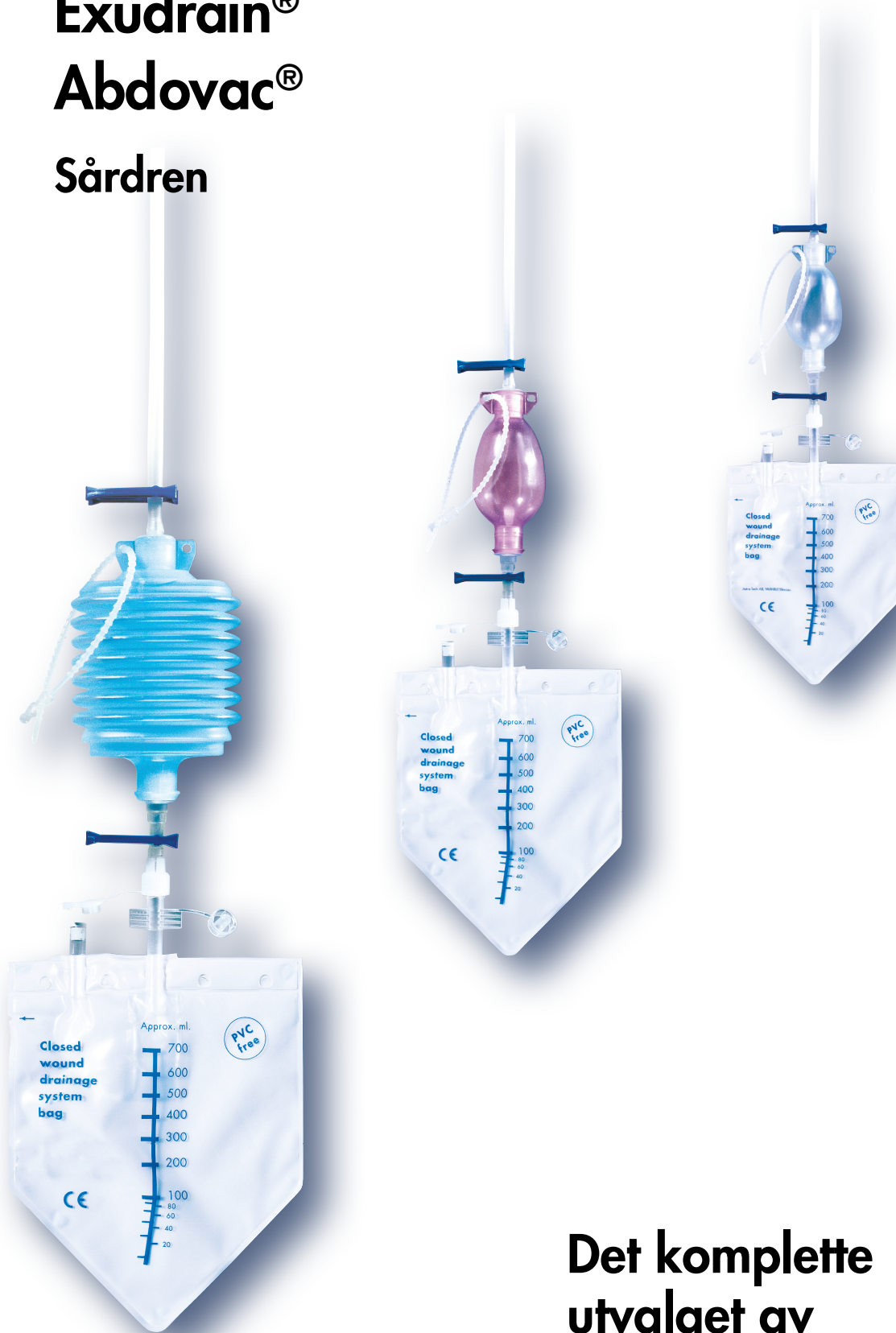

**Det komplette
utvalget av
sårdrenasje til
alle behov**

MEDI PLAST


Vevsvennlig drenasje

Lavvakuum sårdrnasje

Fordelene ved bruk av lukket lavvakuum sårdrnasje fra Mediplast er mange.

- Effektivt sug¹
- Mindre blodtap²
- Bedre oppsamling³
- Tidligere seponering av dren⁴
- Redusert risiko for fastsugning av vev⁵

Ved bruk av for høyt vakuum, kan vev og små blodkar suge seg fast og forårsake unødvendig blødning, samt påføre pasienten ekstra smerter og ubehag. Med Mediplast lavvakuum drenasje får man en effektiv drenering og færre komplikasjoner.⁶

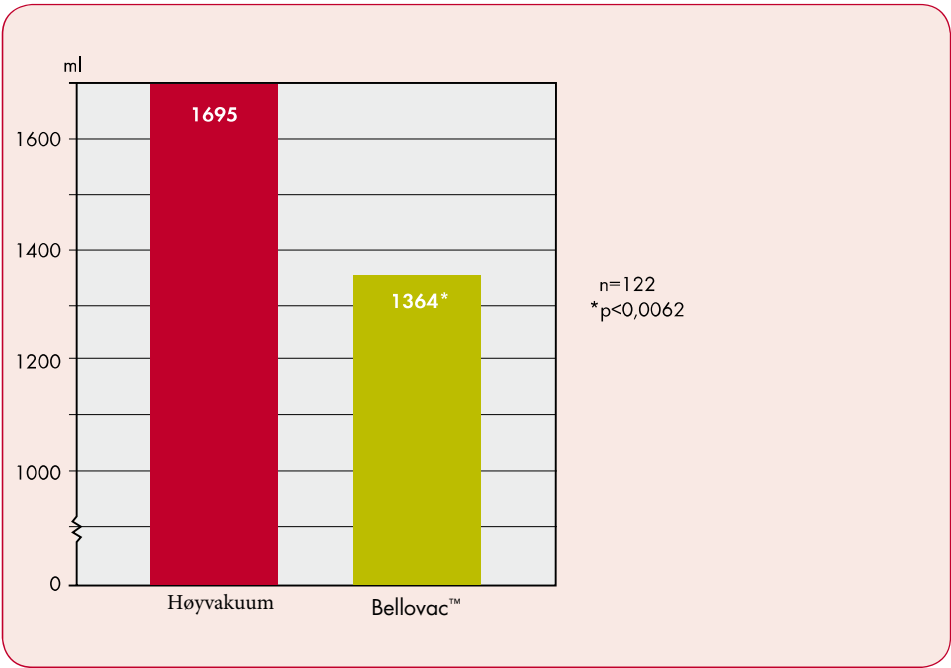


Mindre blodtap med Bellovac.²

Fordel for både pasient og helsepersonell

Mediplast sårdrnen er et fullstendig lukket system som minimerer risikoen for postoperative infeksjoner og for lenget sykehusopphold.

- Drenert sårveske forblir i det lukkede systemet
- En-veis ventiler i sugekilden og oppsamlingsposen
- Tette, sikre koblinger gjennom hele systemet
- Minimal forurensningsrisiko for både pasient og personal⁷
- Bedret pasient- og personalomsorg⁷

Det er lett å forestille seg hvilke fordeler dette gir pasienten: Mindre smerter, raskere sårtilheling og kortere liggetid.

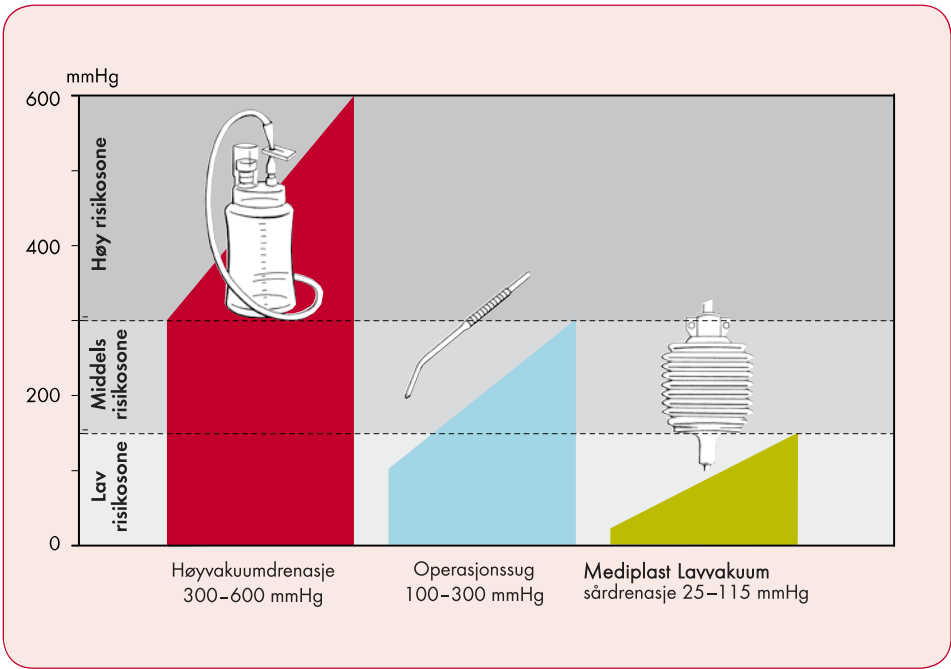

For høy sugekraft kan lett forårsake fastsugning av vev. Sammenlign dette med operasjonssug, hvor hensynet til fravær av vevsskade har høy prioritet.

Bellovac®



Drenasje av store volum

Gjennomsnittlig innledende negativt trykk ved aktivering: 115 mmHg/15 kPa
Volum sugekilde: 220 ml
Volum oppsamlingspose: 700 ml

Operative inngrep:

Ortopedi
Amputasjoner
Generell kirurgi

Ref Nr	Beskrivelse
68390	2x15 Bellovac® Sett FG 10
68391	2x15 Bellovac® Sett FG 14
68392	2x15 Bellovac® Sett FG 18
68393	2x15 Bellovac® Sett FG 10 med troakar
68394	2x15 Bellovac® Sett FG 14 med troakar
68395	2x15 Bellovac® Sett FG 18 med troakar

Exudrain®



Drenasje av middels volum

Gjennomsnittlig innledende negativt trykk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
Volum sugekilde: 110 ml
Volum oppsamlingspose: 700 ml

Operative inngrep:

Generell kirurgi
Bystoperasjoner, f.eks. mastectomier

Ref Nr	Beskrivelse
68406	3x10 Exudrain® Sett FG 10
68407	3x10 Exudrain® Sett FG 14
68408	3x10 Exudrain® Sett FG 18
68409	3x10 Exudrain® Sett FG 10 med troakar
68410	3x10 Exudrain® Sett FG 14 med troakar
68411	3x10 Exudrain® Sett FG 18 med troakar
68428	3x10 Exudrain® Passiv FG 10
68425	3x10 Exudrain® Passiv FG 14

Exudrain® Mini



Drenasje av små volum

Gjennomsnittlig innledende negativt trykk ved aktivering: 75 mmHg/10 kPa
Volum sugekilde: 110 ml

Operative inngrep:

Håndkirurgi
Biopsier
Dagkirurgi

Ref Nr	Beskrivelse
68412	3x10 Exudrain® Mini Sett FG 8
68419	3x10 Exudrain® Mini Sett FG 8 med troakar

Abdovac®

Tilbehør



Når svært skånsom drenasje ønskes

Gjennomsnittlig innledende negativt trykk ved aktivering: 25 mmHg/3,3 kPa
Volum sugekilde: 110 ml
Volum oppsamlingspose: 700 ml

Operative inngrep:

Abdominal kirurgi

Ref Nr	Beskrivelse
68413	3x10 Abdovac® Sett FG 10
68414	3x10 Abdovac® Sett FG 14
68415	3x10 Abdovac® Sett FG 18
68416	3x10 Abdovac® Sett FG 10 med troakar
68417	3x10 Abdovac® Sett FG 14 med troakar
68418	3x10 Abdovac® Sett FG 18 med troakar

Utbytteposer

Ref Nr	Beskrivelse
68337	12x50 Utbyttepose
68480	4x25 Sterile utbytteposer

Y-koblinger

Ref Nr	Beskrivelse
68376	4x25 Y-kobling med FG 10 kateter
68377	4x25 Y-kobling med FG 14 kateter
68378	4x25 Y-kobling med FG 18 kateter
68385	4x25 Y-kobling med FG 10 kateter og troakar
68386	4x25 Y-kobling med FG 14 kateter og troakar
68387	4x25 Y-kobling med FG 18 kateter og troakar

Silikondren

Ref Nr	Beskrivelse
68367	4x15 Rundt dren FG 10 med troakar
68368	4x15 Rundt dren FG 14 med troakar
68369	4x15 Rundt dren FG 18 med troakar
68361	4x15 Flatt dren FG 14, 7 mm med troakar
68362	4x15 Flatt dren FG 14, 10 mm med troakar


Silikondren med slisser

Ref Nr	Beskrivelse
68460	4x15 Silikondren med slisser, runde FG 10 med troakar
68461	4x15 Silikondren med slisser, runde FG 14 med troakar
68462	4x15 Silikondren med slisser, runde FG 18 med troakar
68463	4x15 Silikondren med slisser, flate FG 14, 7 mm med troakar
68464	4x15 Silikondren med slisser, flate FG 14, 10 mm med troakar

Alle silikondren og silikondren med slisser leveres med .

Referanser

1. Loder P, Smith G et al. Aust. NZJ Surg 1987;57:531-5.
2. Morgan-Jones RL, Perko MMJ, Cross M. The Knee 2000;7:149-50.
3. Giordano G, Abib A. Presented as a poster at Chirurgie de la Hanche – Hip Surgery Developments & Future prospects, Sep 1999.
4. Van Heurn LVVE, Brink PRG. Br J Surg 1995;82:931-2.
5. Gerngoss H, Marquardt K. Chirurg 1992;63:447-53.
6. Seely MF. Br J Surg 1979;66:657-9.
7. Zerbe M, Mc Ardle A, Goldrick B. Am J Infect Control 1996;24(5):346-52.

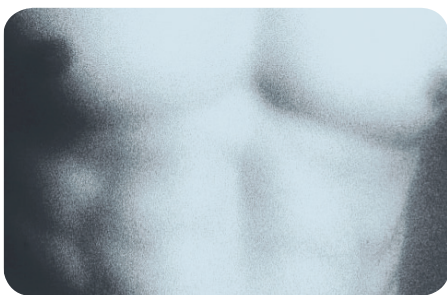

Ulike inngrep krever ulike drenasjer.

Letthåndterlig sårdrenasje

Enkelt i bruk

Medioplast lukkede lav- vakuum sår drenasje er enkelt å bruke. Det er ikke påkrevet med verken dyrt tilbehør eller spesialtrent personell. Det enkle systemet, med en-veis ventiler ved både innløp og utløp på sugeskilden, skaper færre problemer og er dermed personalbesparende. Settene leveres komplette og sterile.



Medioplast sårdren er sikre, enkle og trygge i bruk.

Det komplette utvalget til alle behov

Medioplast sårdrenssortimentet er tilpasset de ulike behovene ved forskjellige operative prosedyrer, hvor hensikten er rask og ukomplisert sårtilheling. Hver drenstype har sine spesielle kvaliteter. På den måten vil man alltid finne et dren som dekker nødvendige krav til volumkapasitet og sugeskraft.

Bellovac® Exudrain® Abdovac® Sårdren

Mediplast tilbyr omfattende assistanse og opplæring i tilknytning til våre produkter. Vi er stolte over å kunne tilby førsteklasses produkter som er grundig testet og klare til bruk. Ikke nøl med å kontakte oss vedrørende spørsmål omkring våre sår- drenasje systemer. Vi står svært gjerne til tjeneste.