

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Bruksområde

TENA Flex er en særdeles lekkasjesikker og behagelig beltebleie, spesielt for brukere som trenger hjelp til skift. Den finnes i fire absorpsjonsnivåer og i fire størrelser : Small, Medium, Large og X-Large, hvilket muliggjør individuell tilpasning.



Unikt elastisk belte, ComfiStretch, som ekspanderer og går tilbake i forhold til kroppens form ved stående, sittende og liggende posisjon

Unik belteforlenger for optimal passform

LekkasjebARRIERER for høy sikkerhet

Midjeelastikk foran gir høy elastisitet og en sikker passform

Diskret våtindikator

Høy elastikk i ryggen for optimal passform i korsryggen

Hoftebeltet er stabilt og mykt, det ruller ikke ned, men sitter behagelig ved bruk

Overflaten har FeelDry™-teknologi som raskt kapsler inn urin og holder huden tørr

Enkel å feste  
Fikses med borrelås direkte på beltet.  
Kan justeres og lukkes flere ganger

Bruksanvisning på pakken forenkler påsettingen for pleiepersonalet



Odour Neutralizer for nøytraliserende effekt på uønsket lukt





Takket være den symmetrisk formede kjernen absorberer TENA Flex like bra på begge sider. Dette gjør at den kan settes på både bak- og forfra, hvilket gir en ergonomisk arbeidsstilling for pleiepersonalet og økt verdighet for brukeren






# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Bruksanvisning



### Stående forfra

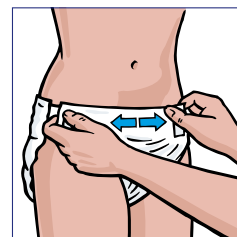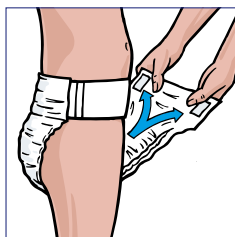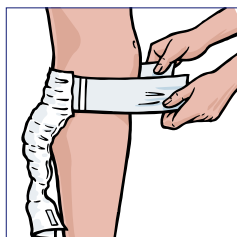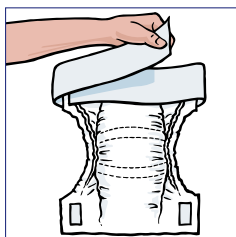

### Stående bakfra

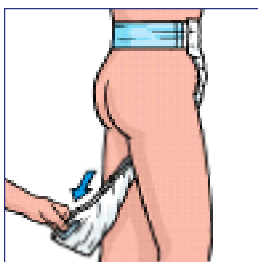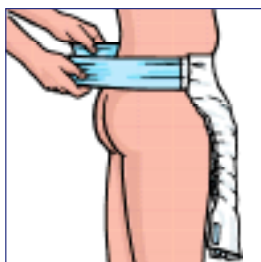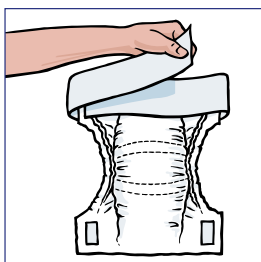

### Liggende

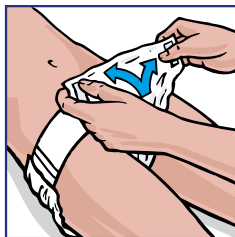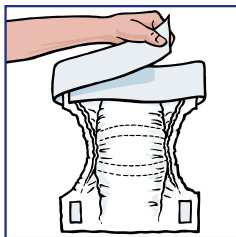

<sup>1</sup> TENA Flex i størrelse XL har en ekstra borrelås i stedet for midjeelastikk foran, gir ekstra sikker passform

| NAF nr. | Art.nr. | Produktnavn                     | Absorpsjons-<br>evne | Livvidde   | Fargekode | Antall<br>Pose/Kart. | Godkjent<br>Helfo | Svane-<br>merket |
|---------|---------|---------------------------------|----------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|------------------|
| 903953  | 723130  | TENA Flex <b>Plus</b> Small     |                      | 60-85 cm   |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 921618  | 723230  | TENA Flex <b>Plus</b> Medium    |                      | 70-105 cm  |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 913716  | 723330  | TENA Flex <b>Plus</b> Large     |                      | 80-125 cm  |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
|         | 723430  | TENA Flex <b>Plus</b> X-Large   |                      | 105-155 cm |           | 30/90                |                   | Ja               |
| 839686  | 724130  | TENA Flex <b>Super</b> Small    |                      | 60-85 cm   |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 816980  | 724230  | TENA Flex <b>Super</b> Medium   |                      | 70-105 cm  |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 899263  | 724330  | TENA Flex <b>Super</b> Large    |                      | 80-125 cm  |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 868296  | 724430  | TENA Flex <b>Super</b> X-Large  |                      | 105-155 cm |           | 30/90                | Ja                | Ja               |
| 922950  | 725228  | TENA Flex <b>Maxi</b> Small     |                      | 60-85 cm   |           | 22/66                | Ja                | Ja               |
| 898868  | 725222  | TENA Flex <b>Maxi</b> Medium    |                      | 70-105 cm  |           | 22/66                | Ja                | Ja               |
| 867956  | 725322  | TENA Flex <b>Maxi</b> Large     |                      | 80-125 cm  |           | 22/66                | Ja                | Ja               |
| 921675  | 725421  | TENA Flex <b>Maxi</b> X-Large   |                      | 105-155 cm |           | 21/63                | Ja                | Ja               |
|         | 725130  | TENA Flex <b>Ultima</b> Small   |                      | 60-85 cm   |           | 20/60                |                   | Ja               |
|         | 725220  | TENA Flex <b>Ultima</b> Medium  |                      | 70-105 cm  |           | 20/60                |                   | Ja               |
|         | 725320  | TENA Flex <b>Ultima</b> Large   |                      | 80-125 cm  |           | 20/60                |                   | Ja               |
|         | 725400  | TENA Flex <b>Ultima</b> X-Large |                      | 105-155 cm |           | 17/51                |                   | Ja               |
|         | 720000  | TENA Flex belteforlenger        |                      | 29 cm      |           | 10/120               |                   |                  |

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex



3023 0023

## TENA Flex

| Absorpsjonsnivå/<br>størrelse | Svane-<br>merket | Livvidde<br>cm | Lengde<br>cm | Vekt<br>g | Lår<br>cm | Antall/pose<br>stk | Antall/kart<br>stk | Antall.kart<br>halvpall | Praktisk<br>abs | ISO 11948-1<br>Absorpsjons-<br>kapasitet | Essity<br>Art.nr |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| Plus                          |                  |                |              |           |           |                    |                    |                         |                 |                                          |                  |
| Small                         | ✓                | 60-90          | 71           | 70        | < 72      | 30                 | 90                 | 16                      | 519             | 1557                                     | 723130           |
| Medium                        | ✓                | 70-105         | 80           | 81        | < 84      | 30                 | 90                 | 16                      | 595             | 1785                                     | 723230           |
| Large                         | ✓                | 85-120         | 86           | 95        | < 99      | 30                 | 90                 | 16                      | 699             | 2096                                     | 723330           |
| X-large                       | ✓                | 105-155        | 103          | 120       | < 116     | 30                 | 90                 | 12                      | 754             | 2261                                     | 723430           |
| Super                         |                  |                |              |           |           |                    |                    |                         |                 |                                          |                  |
| Small                         | ✓                | 60-90          | 71           | 83        | < 72      | 30                 | 90                 | 16                      | 647             | 1942                                     | 724130           |
| Medium                        | ✓                | 70-105         | 80           | 93        | < 84      | 30                 | 90                 | 16                      | 750             | 2250                                     | 724230           |
| Large                         | ✓                | 85-120         | 86           | 103       | < 99      | 30                 | 90                 | 16                      | 797             | 2392                                     | 724330           |
| X-large                       | ✓                | 105-155        | 103          | 140       | < 116     | 30                 | 90                 | 12                      | 979             | 2936                                     | 724430           |
| Maxi                          |                  |                |              |           |           |                    |                    |                         |                 |                                          |                  |
| Small                         | ✓                | 60-90          | 71           | 112       | < 72      | 22                 | 66                 | 16                      | 924             | 2771                                     | 725228           |
| Medium                        | ✓                | 70-105         | 80           | 120       | < 84      | 22                 | 66                 | 16                      | 1008            | 3025                                     | 725222           |
| Large                         | ✓                | 85-120         | 86           | 143       | < 99      | 22                 | 66                 | 16                      | 1191            | 3573                                     | 725322           |
| X-large                       | ✓                | 105-155        | 103          | 193       | < 116     | 21                 | 63                 | 12                      | 1521            | 4564                                     | 725421           |
| Ultima                        |                  |                |              |           |           |                    |                    |                         |                 |                                          |                  |
| Small                         | ✓                | 60-90          | 71           | 127       | < 72      | 20                 | 60                 | 16                      | 1067            | 3202                                     | 725130           |
| Medium                        | ✓                | 70-105         | 80           | 144       | < 84      | 20                 | 60                 | 16                      | 1195            | 3586                                     | 725220           |
| Large                         | ✓                | 85-120         | 86           | 170       | < 99      | 20                 | 60                 | 16                      | 1422            | 4265                                     | 725320           |
| X-large                       | ✓                | 105-155        | 103          | 219       | < 116     | 17                 | 15                 | 12                      | 1704            | 5112                                     | 725400           |
| TENA Flex<br>Belteforlenger   |                  |                | 29           | 2,5       | -         | 10                 | 120                | 168                     |                 |                                          | 720000           |

# Produktdatablad TENA ProSkin Flex

## Varedeklarasjon

### OVERFLATE INNSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Tørrhet/mykhet mot huden

### OVERFLATE UTSIDEN

Materiale: Nonwoven

Funksjon: Økt komfort og diskresjon

### INSLIPP- OG SPREDNINGSMATERIALE

Materiale: Polyethylene, High loft nonwoven

Funksjon: Rask absorbering og effektiv spredning av urin, hindrer urinen i å trekke tilbake til overflaten

### ABSORBSJONSKJERNE, Øvre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

### ABSORBSJONSKJERNE, Nedre

Materiale: Cellulosemasse og superabsorbenter

Funksjon: Spre, absorbere og holde på væsken

### SUPERABSORBENT

Materiale: Polyacrylat

Funksjon: Absorbere og holde på væsken, samt til en viss grad nøytralisere uønsket lukt

### SPERRESJIKT

Materiale: Polyeten som puster

Funksjon: Forhindre lekkasje/gjennomvætning, tillate fuktig luft å ventileres ut fra produktet, og således bidra til et godt miljø for huden og komfort

### HOFTEBELTE

Materiale: Non-woven

Funksjon: Fikseringsoverflate for borrelåser på produktet, mykt for huden, pustende

### ELASTIKK I HOFTEBELTET

Materiale: SBS og Non-woven

Funksjon: Følge kroppens bevegelser og holde produktet på plass, komfort

### MIDJEELASTIKK

Materiale: Polyeten og SBS

Funksjon: Holde produktet på plass, komfort

### BENELASTIKK

Materiale: Syntetiske polyeter-polyuretantråder (Spandex)

Funksjon: Komfort og forhindre lekkasje

### BARRIERELASTIKK

Materiale: Elastan

Funksjon: Forhindre sidelekkasje av urin og avføring

For samtlige TENA Flex-produkter gjelder at følgende materialer /ingredienser ikke har blitt benyttet: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, duftemner, hudpleiende midler eller parfyme.

Produktene kan benyttes inntil tre år etter tilvirkningsdato. Lagres under normale forhold, og bør ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fukt. Produktene er klassifisert som medisintekniske produkter, og er CE-merkede.

## Kontakt oss for mer informasjon

☎ 22 70 62 00

tena.no