

+ ALLEVYN[◇] COMPLETE CARE skumbandasje

Bidrar til å minimere lekkasje*¹⁻³
og beskytter mot faktorer som
bidrar til trykkskader.^{†4-7}



Smith+Nephew

ALLEVYN[◇]
COMPLETE CARE
Skumbandasje

www.smith-nephew.com

Indikasjoner

- Sekundær sårbehandling på grunne granulerende sår, kroniske og akutte eksuderende sår, enkle og kompliserte sår, inkludert følgende:
 - trykksår
 - bensår
 - diabetiske fotsår
 - kirurgiske sår
 - førstegrads- og andregradsforbrenninger
 - donorsteder for hudtransplantater
 - hudavskrapninger
 - kreftsår
- Forebygging av trykkskader som en del av en forebyggingsprotokoll for trykkskader

Kombinasjonsbruk

- Kan brukes sammen med INTRASITE[◇] GEL for nekrotiske sår eller sår med fibrinbelegg
- Kan brukes sammen med PROFORE[◇] flerlags kompresjonsbandasjesystem



LAV-HØY
ABSORBERINGSEVNE

ALLEVYN[®] COMPLETE CARE skumbandasjer med sin unike konstruksjon bidrar til å minimere lekkasje^{*1-3} og beskytte mot faktorer som bidrar til trykkskader^{†4-7}

Funksjoner og fordeler

Eksudathåndtering



ExuLOCK[®] avansert innkapslingsteknologi

- Innkapsling av eksudat og bakterier selv under kompresjon^{1,8}
- Bruker lateral absorpsjon over hele bandasjeområdet^{*9} for å bidra til å forhindre lekkasje^{2,3}
- Gir et fuktighetsbevarende sårtilhelingsmiljø[†] som er optimalt for tilheling og håndtering av væskevolumet i bandasjen^{3,5,9,10}

ExuMASK[®]-indikatorteknologi for bandasjeskift


- Skjuler absorbert eksudat, slik at den bevarer et renere utseende over lengre tid^{2,3,9,11-14}
- Indikerer visuelt når bandasjen skal skiftes¹¹

Visuell veiledning for ExuMASK skiftindikator



ComfortSTAY[®] mykt silikonklebemiddel-teknologi

- Balanserer adhesjon med skånsomhet¹⁵⁻¹⁷
- Er atraumatisk for såret og huden rundt, noe som minimerer smerter ved fjerning^{3,16-18}

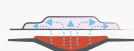

ALLEVYN høyabsorberende skum

- Vedvarende vertikal absorpsjon bidrar til å minimere væskeansamling og maserasjon^{1,3,9}
- Skumporestørrelsen håndterer lav til høy viskositet⁹



Filmen på overflaten er høyt pustende

- Vedvarende bakteriebarriere^{†19}
- Kan brukes når du dusjer²⁰

HighFLEX fleksibilitetsteknologi



- Svært føyeelig og fleksibel^{7,21}
- Tilpasser seg kroppens konturer godt^{5,22}
- Hjelper med påføring på vanskelige områder^{5,12,22}

Forebygging av trykkskader




ShearDEFENSE[®] teknologi der bandasjelagene er frittstående

- Proprietær konstruksjon som gjør at lagene kan bevege seg i forhold til hverandre i bandasjen^{*4}
- Absorberer skjærkrefter og reduserer bløtvevsbelastning^{*4,23} for å minimere risikoen for trykkskader²⁴
- Svært effektiv skjærkraft- og friksjonsabsorpsjon^{†4}



ComfortSTAY myk silikonklebemiddel-teknologi

- Kan reposisjoneres samtidig som klebeevnen opprettholdes, for å forenkle hudinspeksjoner gjennom bandasjens brukstid^{*15}

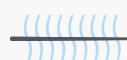

Filmen på overflaten er høyt pustende

- Bidrar til å skape et optimalt mikroklima^{5,10}



Omfordeling av trykk

- Sprer trykket fra ytre påvirkning^{*6}

ALLEVYN COMPLETE CARE-bandasjeserien

S+N-kode	Størrelse	Eske
66807695	7,5 cm × 7,5 cm	10
66807696	10 cm × 10 cm	10
66807697	12,5 cm × 12,5 cm	10
66807698	15 cm × 15 cm	10
66807699	17,5 cm × 17,5 cm	10
66807700	10 cm × 20 cm	10
66807701	10 cm × 30 cm	10
66807702	Multisite 17,1 cm × 17,9 cm	10
66807703	Liten sakrum 17,2 cm × 17,5 cm	10
66807704	Stor sakrum 21,6 cm × 23 cm	10
66807705	Hæl 25 cm × 25 cm	10



* Som vist in vitro. † Som vist in silico og in vitro. ‡ I løpet av bandasjens brukstid. § ALLEVYN 5-lagsbandasjer. || Som vist in silico.

Advanced Wound Management
Smith & Nephew Medical Ltd
Croxley Park Building 5
Lakeside, Hatters Lane, Watford
Hertfordshire WD18 8YE - UK

www.smith-nephew.com

T +44 (0) 1482 225181
F +44 (0) 1482 328326

© Varemerket tilhører Smith+Nephew
Alle varemerker anerkjent
© August 2025 Smith+Nephew
AWM-AWC-47986-no. GMC1944

Det er ikke sikkert at alle produkter er tilgjengelig i alle markeder siden produkttilgjengelighet avhenger av regulatorisk og/eller medisinsk praksis i de enkelte markedene. Kontakt din representant eller distributør for Smith+Nephew hvis du har spørsmål om tilgjengeligheten av produkter fra Smith+Nephew i ditt område. For detaljert produktinformasjon, inkludert indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler, se produktets bruksanvisning før bruk.

Referanser: 1. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.008. 2. Tiscar-González V, et al. Adv Skin Wound Care. 2021;34(1):23–30. 3. Rossington A, et al. Wounds UK. 2013;9(4):91–95. 4. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.057 V2. 5. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.011. 6. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.016. 7. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.012. 8. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.019 V2. 9. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.009 V2. 10. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.010. 11. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.023 V2. 12. Simon D, Bielby A. Wounds UK. 2014;10(3):80–87. 13. Joy H, et al. J Wound Care. 2015;24(7):312, 314–317. 14. Costa B, Allen D. Poster presented at: EWMA; 2023. 15. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.015 V2. 16. Vowden K, et al. Paper presented at: EWMA; 2011. 17. Smith+Nephew. Internal report EA/AWM/GENERAL/001/v2. 18. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN[®] Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32–44. 19. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.014. 20. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.017. 21. Smith+Nephew 2025. Internal report CSD.AWM.25.013. 22. Stephen-Haynes J, et al. Journal of Community Nursing. 2013;27(5):50–59. 23. Smith+Nephew 2024. Internal report CSD.AWM.24.058 V2. 24. Atkinson L, Costa B. Poster presented at: EWMA; 2024.